

**BS 444 CONNECT 40444**



**BS 445 CONNECT 40441**



**Návod k použití**

## **DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!**

**Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud přístroj, předáte třetí osobě, předejte jí k němu rovněž tento návod k použití.**

- Přístroj používejte pouze v souladu s určeným účelem podle návodu k použití.
- Přístroj je určený pro domácí použití
- Přístroj je určený pro lidi s hmotností do 180kg
- Tento přístroj není vhodný pro těhotné!
- Jelikož při analýze tuku tělem prochází elektrický proud, z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tuto analýzu u dětí. Nicméně se můžou vážit bez obav.
- Tato váha není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotnickými implantáty. Při cukrovce nebo jiných zdravotních/fyzických omezeních může být údaj o tělesném tuku nepřesný. Totéž platí i pro osoby s intenzivní sportovní aktivitou.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl z výšky nebo do vody nebo pokud je poškozený.



### **Nebezpečí uklouznutí!**

Nikdy na váhu nestoupejte s mokřýma nohama. Nikdy na váhu nestoupejte v ponožkách. Nikdy nepokládejte váhu na nerovný povrch. Když se vážíte, nikdy nestůjte na okraji váhy. Vždy stůjte nehnutě uprostřed váhy tak že, každé chodidlo se dotýká dvou elektrod. Pravé chodidlo elektrod na pravé straně a levé chodidlo na levé straně.



### **Nebezpečí pro děti!**

Spolknutí baterií může mít fatální následky. Proto uchovávejte baterie a i samotný přístroj mimo dosah dětí. Pokud dojde k spolknutí baterií, okamžitě kontaktujte lékaře. Obal držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušením.

### **Nebezpečí související s bateriemi!**

Baterie se nesmí zdeformovat, rozebrat, hodit do ohně nebo zkratovat. Pokud baterie vytekly, vyhněte se kontaktu s tekutinou z baterií. Pokud tekutina zasáhla nějakou oblast pokožky, důkladně ji opláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.

Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu (+/-)

Používejte pouze stejné baterie (3x AAA, 1,5V)

Chraňte baterie před vysokou teplotou. Pokud delší dobu přístroj nepoužíváte, baterie vyjměte. Zabráníte tím vytečení baterií.



## **Nebezpečí poškození!**

Chraňte přístroj před vlhkostí. Udržujte váhu v bezpečné vzdálenosti od vody.

Pokud je povrch váhy mokry nebo vlhky, může být kluzký. Udržujte povrch suchý.

Udržujte váhu od horkých povrchů a od přímého slunečního záření.

Chraňte váhu před nárazem a netřeste s ní.

Nedělejte na váze žádné změny a nepokoušejte se ji otevřít.

V případě poruch si neopravujte přístroj sami. Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu. V opačném případě ztrácíte nárok na případnou záruční opravu.

Podlahy mohou být ošetřené různými čisticími prostředky, které mohou poškodit nebo zjemnit nožičky váhy, proto položte váhu na pevný a rovný povrch.

K čištění nepoužívejte žádné chemické nebo silné pěnové prostředky.

Tímto prohlašujeme, že osobní váha typu: BS 444 connect / BS 445 connect, vyr. 40444 / 40441 odpovídá základním požadavkům evropské směrnice RTTE 1999/5/EC. Úplné znění EC prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss, Německo nebo si je stáhnout na internetových stránkách společnosti Medisana ([www.medisana.com/bs444connect](http://www.medisana.com/bs444connect)) ([www.medisana.com/bs445connect](http://www.medisana.com/bs445connect)).

**Další informace a servisní adresy pro jednotlivé země najdete na adresách [www.medisana.com/bs444connect](http://www.medisana.com/bs444connect) / a [www.medisana.com/bs445connect](http://www.medisana.com/bs445connect)**

## A. Jednoduché vážení pomocí funkce „Step-on“






1. Postavte se na váhu

2. Zobrazí se Vaše hmotnost

## B. Nastavení osobních údajů na váze

Do paměti váhy můžete uložit údaje (pohlaví, kondice, výška, věk) pro 8 osob s 30 pozicemi paměti pro každou osobu.

Váha má tyto přednastavené hodnoty: muž, 164cm, 30 let, kg.

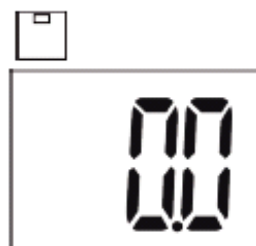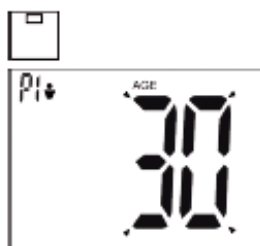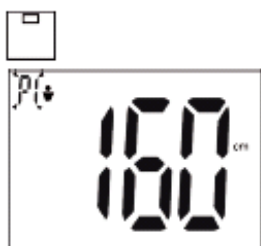

1. Stiskněte tlačítko SET, dokud na displeji nezačne blikat paměťové místo
2. Pomocí tlačítka ▲/▼ vyberte požadované paměťové místo

3. Pro uložení výběru stiskněte tlačítko SET. Obdobným způsobem pokračujte při nastavení pohlaví, kondice, výšky a věku.

4. Po nastavení Vašich osobních údajů se na displeji zobrazí „0.0“
5. Pro ukončení nastavení váhy se jednoduše postavte bosými nohama na váhu

6. Na displeji se zobrazí následující hodnoty:
  - Hmotnost
  - Procento tělesného tuku
  - Procento vody v těle
  - Procento svalové hmoty
  - Hmotnost kostí
  - BMR (kalorická spotřeba)
  - BMI

## C. Připojte váhu ke svému smartphonu


Váhu a smartphonu je třeba jednorázově vzájemně propojit pomocí Bluetooth\*

Stáhněte si prosím aktuální aplikaci VitaDock+ a postupujte podle níže uvedených pokynů

\***iOS:** iPhone4S a novější, iPad3 a novější. **Android:** zařízení které podporují Google-Android – verzi 4.3 a Bluetooth 4.0




1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci VitaDock+ v AppStore nebo Google play store

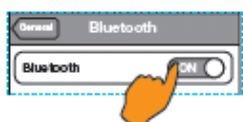



2. Aktivujte Bluetooth na svém operačním systému iOS nebo Android

3. Spusťte aplikaci

Ujistěte se, že máte stabilní internetové připojení (3G nebo WLAN). Zaregistrujte se na VitaDock online

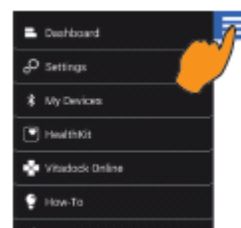


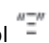
4. Klikněte na symbol  v levém horním rohu a dostanete se do nastavení v aplikaci.

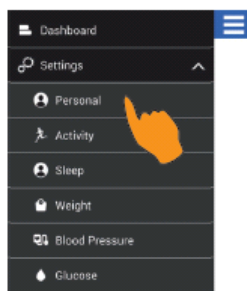


5. Zvolte „Settings“ a „Personal“. Nastavte Vaše osobní data a stiskněte „Save“ pro uložení. Tým se dostanete spět do Menu.

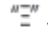


6. Klikněte opět na symbol  v levém horním rohu a zvolte „Weight“ a zadejte Vašu hmotnost. Poté uložte tlačítkem „Save“

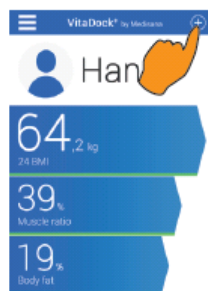

7. Teď zvolte symbol  v pravém horním rohu. Tým se dostanete do menu „My devices“ – Moje zařízení.

8. Pro vytvoření spojení mezi smartphonem a váhou stiskněte tlačítko SET, vyberte své paměťové místo. Postavte se na váhu bosýma nohama a nechte proběhnout celé měření. To bude ukončené krátkým pípnutím.

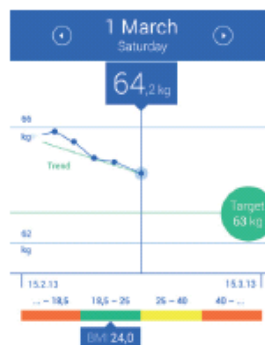

Poznámka:

Pokud se naměřené hodnoty nepřesunou do aplikace, měření opakujte.




Stabilní internetové připojení je nezbytné pro synchronizaci telefonu s aplikací.

9. Po ukončení měření se v menu „My Devices“ – moje zařízení zobrazí váha

11. Naměřené hodnoty se automaticky přesunou a uloží do aplikace VitaDock+

10. Stiskněte modré tlačítko „Connect“. Pokud je váha již spojena s telefonem, tlačítko bude zelené.

## D. Vážení pomocí spartphonu a aplikací VitaDock+

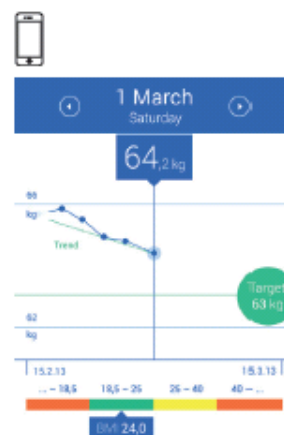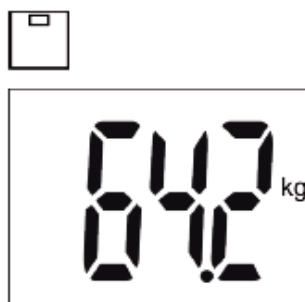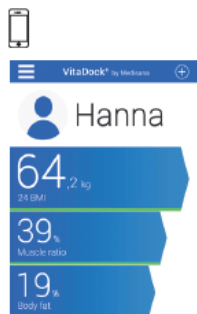

1. Spustíte aplikaci

2. Postavte se na váhu bosýma nohama a nechte proběhnout celé měření. To bude ukončené krátkým pípnutím.

3. Na displeji se zobrazí následující hodnoty:

- Hmotnost
- Procento tělesného tuku
- Procento vody v těle
- Procento svalové hmoty
- Hmotnost kostí
- BMR (kalorická spotřeba)
- BMI

4. Teď zvolte symbol  $\oplus$  v pravém horním rohu. Stlačte zelené tlačítko „Connect“

5. Naměřené hodnoty se automaticky přesunou a uloží v aplikaci.

V průběhu kontinuální optimalizace výrobků, si vyhrazujeme právo pravidelně aktualizovat aplikaci VitaDock+. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně provádět aktualizaci. Příložené obrázky slouží pouze jako reference.