


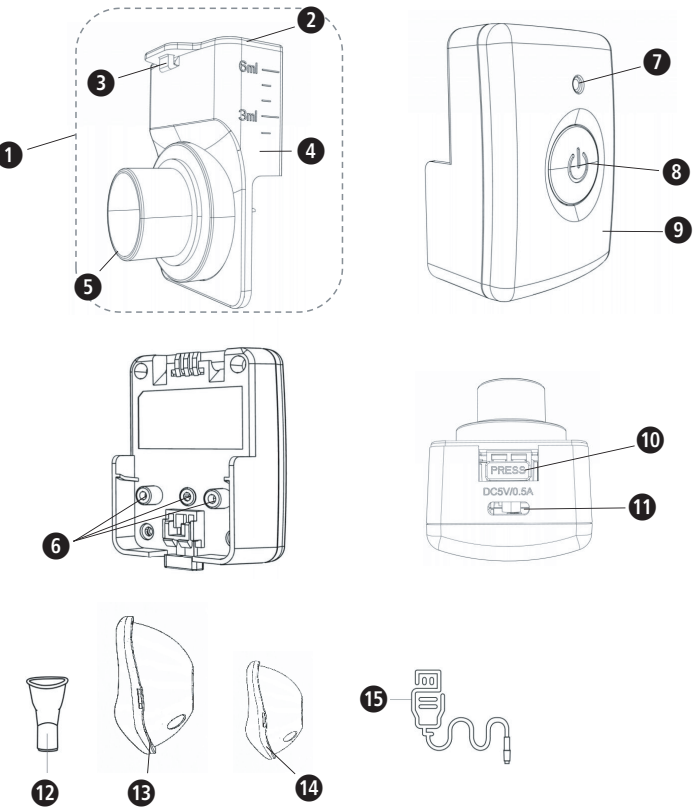

Gerät und Bedienelemente

- 1 Verneblerkopf-Einheit
- 2 Abdeckung
- 3 Verschluss
- 4 Vernebertank
- 5 Verneblerkopf
- 6 Elektroden
- 7 Betriebsanzeige
- 8 Ein-/Aus-Schalter
- 9 Basis-Einheit
- 10 Demontage-Taste
- 11 Ladekabelanschluss
- 12 Mundstück
- 13 Erwachsenenmaske
- 14 Kindermaske
- 15 USB-C-Kabel

Zeichenerklärung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.




WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät

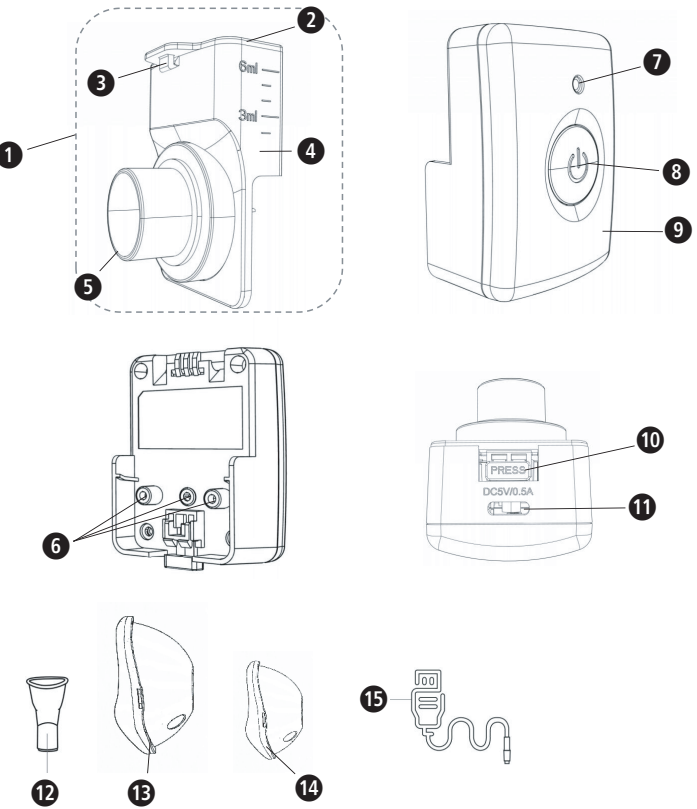

Device and controls

- 1 Nebulizer head 2 Cover 3 Lock
- 4 Medicine cup 5 Aerosol head 6 Electrodes
- 7 Power indicator 8 ON/OFF button 9 Main unit
- 10 Disassembly button 11 Charging cable port 12 Mouthpiece
- 13 Adult mask 14 Child mask 15 USB-C cable

Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Device classification: type BF

Authorized EU representative

LOT	LOT number	SN	Serial number
MD	Medical device		
	Ambient pressure limitation		Humidity range


Recycling symbols/codes:
These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.

IP25
Protected against solid foreign objects 12.5 mm in diameter and larger, and directly affected by water spray in any direction without harmful effects.

Importer

Intended use

- The **medisana** inhaler **IN 7**

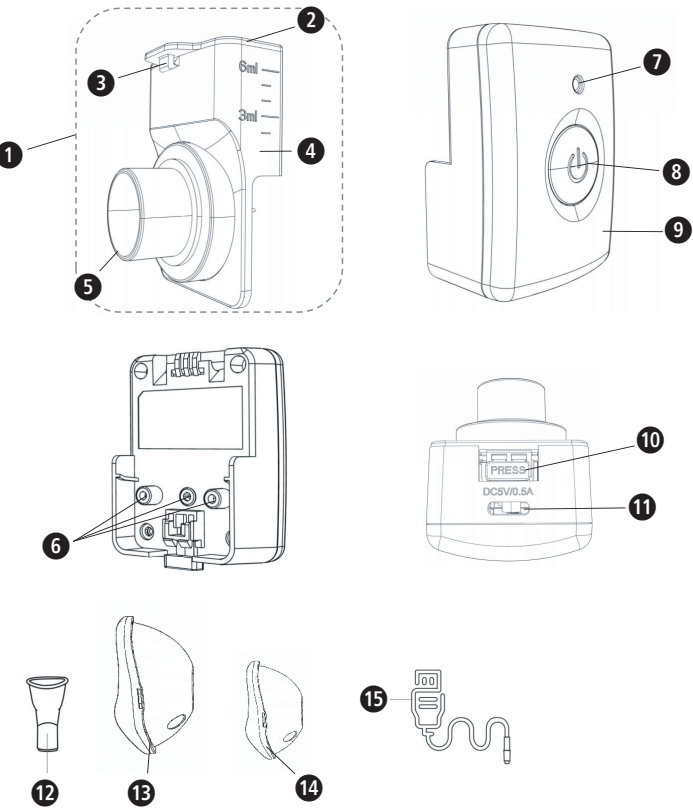

Apparaat en bedieningselementen

- 1 Vernevelkop-unit
- 2 Klep
- 3 Sluiting
- 4 Vernevelreservoir
- 5 Vernevelkop
- 6 Elektroden
- 7 Powerlampje
- 8 Aan-/uitknop
- 9 Basisunit
- 10 Demontageknop
- 11 Oplaadaansluiting
- 12 Mondstuk
- 13 Volwassenenmasker
- 14 Kindermasker
- 15 USB-C-snoer

Legenda


Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de gebruiksneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

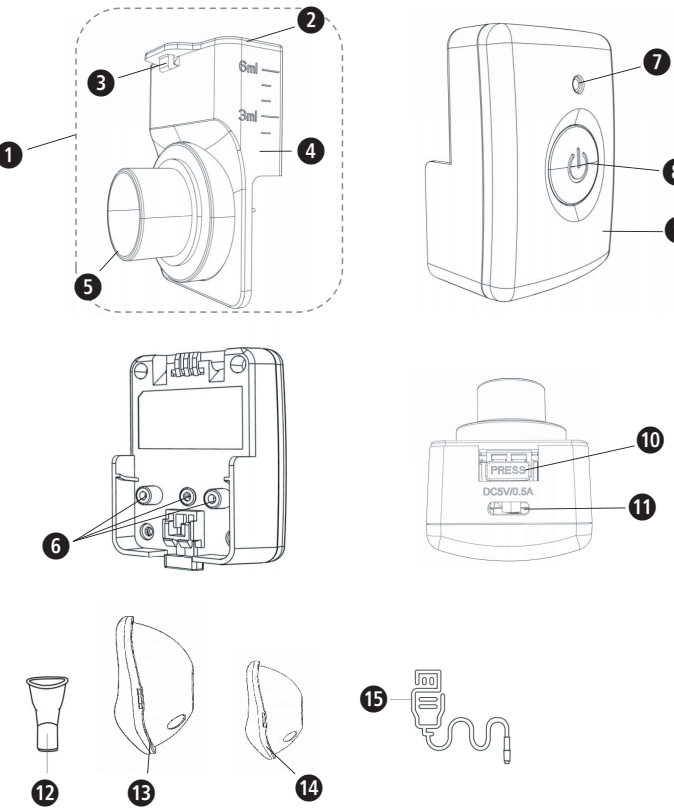

Appareil et éléments de commande

1 Unité de tête du nébuliseur **2** Couvercle **3** Fermoir
4 Réservoir du nébuliseur **5** Tête du nébuliseur **6** Électrodes
7 Témoin de fonctionnement **8** Interrupteur Marche/Arrêt **9** Unité de base
10 Touche de démontage **11** Port du câble de charge **12** Embout buccal
13 masque pour adulte **14** masque pour enfant **15** Câble de charge USB-C

Explication des symboles




Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



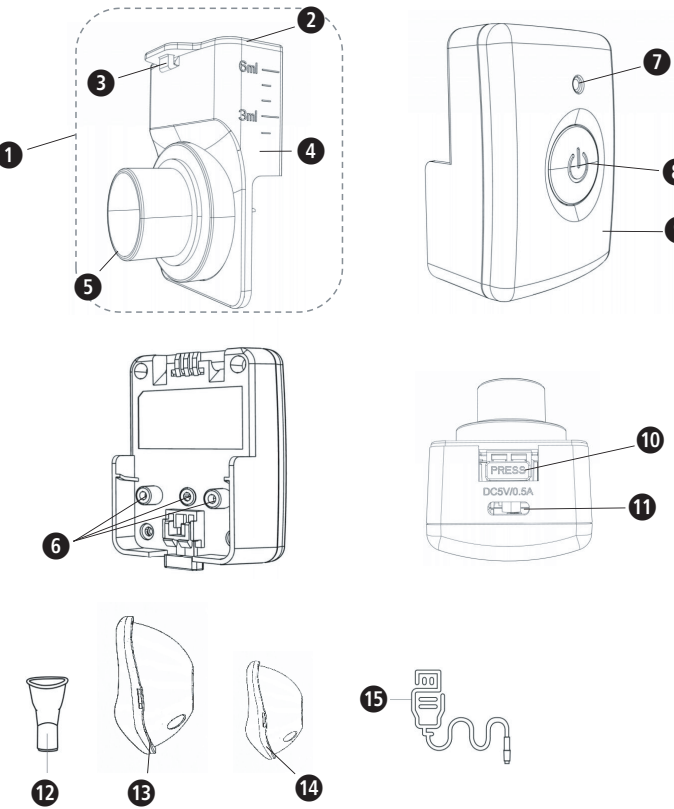

Aparato y elementos de mando


- 1 Cabezal nebulizador
- 2 Cubierta
- 3 Cierre
- 4 Depósito del nebulizador
- 5 Cabezal nebulizador
- 6 Indicador de funcionamiento
- 7 Botón de encendido/apagado
- 8 Unidad de base
- 9 Tecla de desmontaje
- 10 Conexión del cable de carga
- 11 Aplicador bucal
- 12 Mascarilla para adultos
- 13 Mascarilla infantil
- 14 Cable USB-C

Legenda

Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.

ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.

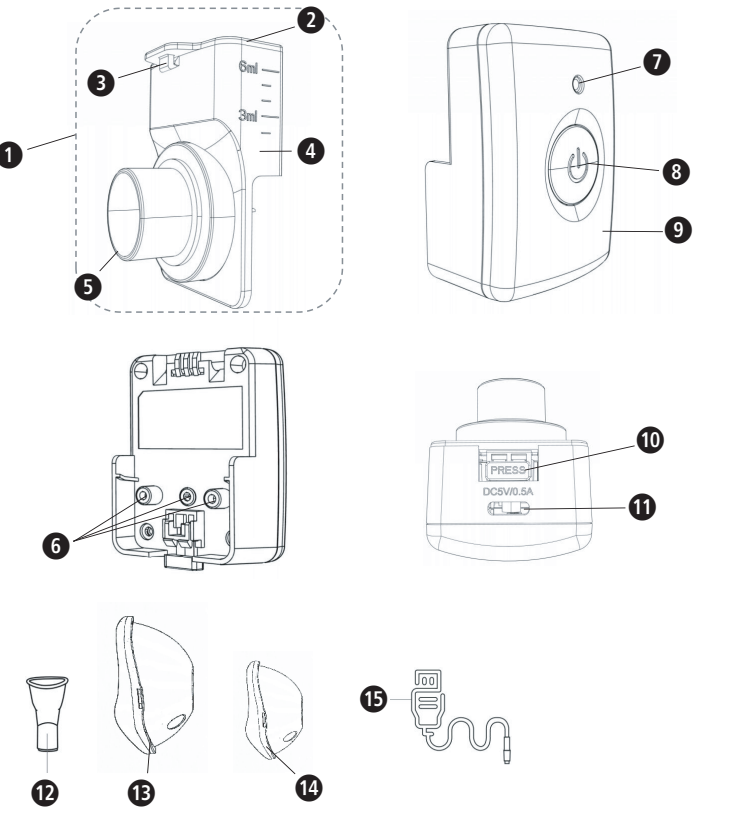


Dispositivo ed elementi di comando

- 1 Unità della testa del nebulizzatore
- 2 Coperchio
- 3 Chiusura
- 4 Serbatoio del nebulizzatore
- 5 Testa del nebulizzatore
- 6 Elettrodi
- 7 Spia luminosa
- 8 Interruttore ON/OFF
- 9 Unità di base
- 10 Tasto di smontaggio
- 11 Cavo di ricarica
- 12 Boccaglio
- 13 Maschera per adulti
- 14 Maschera per bambini
- 15 Cavo USB-C

Spiegazione dei simboli


Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza

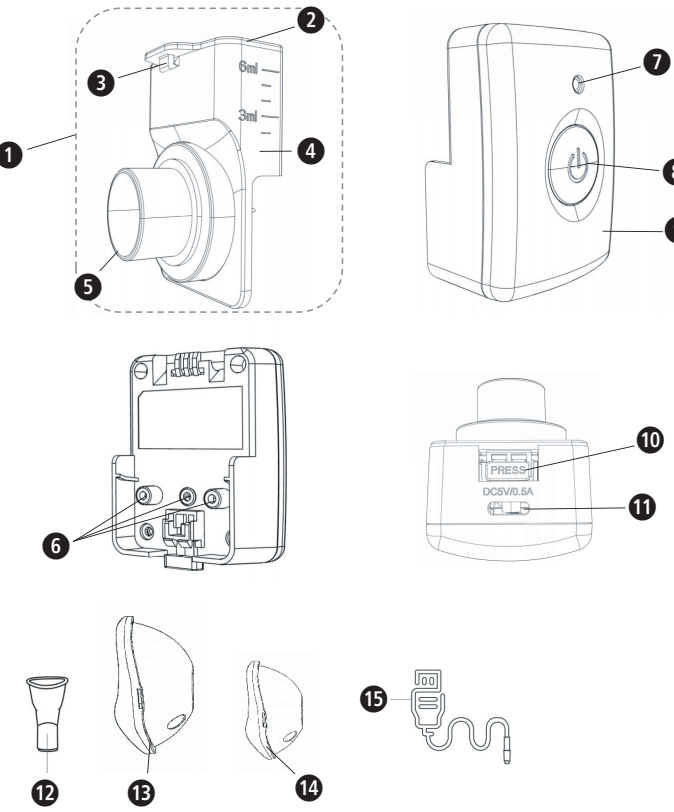

Aparelho e elementos do comando
1 Unidade da cabeça do nebulizador 2 Cobertura 3 Fecho
4 Depósito do nebulizador 5 Cabeça do nebulizador
6 Elétrodos 7 Indicador de funcionamento 8 Interruptor pra ligar/desligar 9 Unidade de base 10 Botão de desmontagem
11 Entrada do cabo de carregamento 12 Bocal 13 Máscara para adultos 14 Máscara para crianças 15 Cabo USB-C

Explicação dos símbolos

Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves

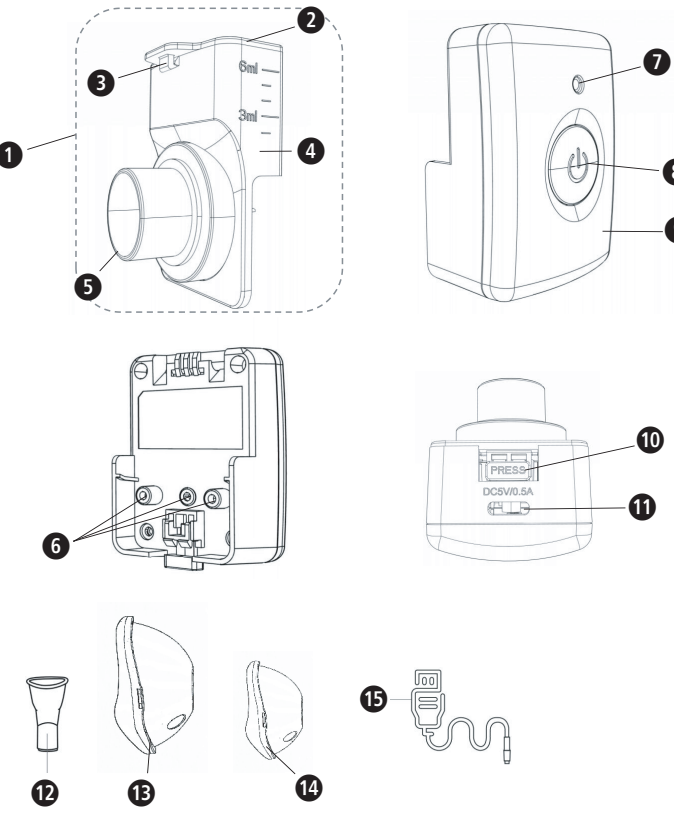


Laite ja käyttöelementit

- 1 Sumutinpääyksikkö
- 2 Kansi
- 3 Suljin
- 4 Sumutinsäiliö
- 5 Sumutinpää
- 6 Elektrodit
- 7 Käyttönäyttö
- 8 Virtakytin
- 9 Perusyksikkö
- 10 Irrotuspainike
- 11 Latausjohdon liitäntä
- 12 Suukappale
- 13 Aikuisten maski
- 14 Lasten maski
- 15 USB-C-johto


Merkkien selitys

Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

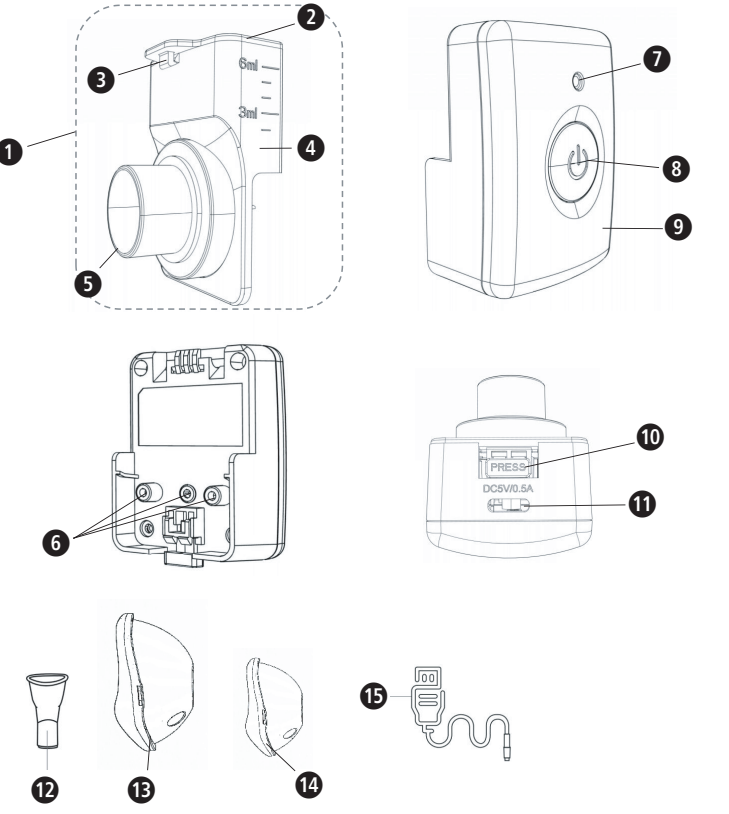

Enheten och reglagen

- 1 Nebulisatorhuvudenhet
- 2 Lock
- 3 Lås
- 4 Nebulisatorhuvud
- 5 Elektroder
- 6 Driftstatuslampa
- 7 PA-/AV-knapp
- 8 Basenhet
- 9 Demonteringsknapp
- 10 Laddkabelanslutning
- 11 Munstycke
- 12 Vuxenmask
- 13 Barnmask
- 14

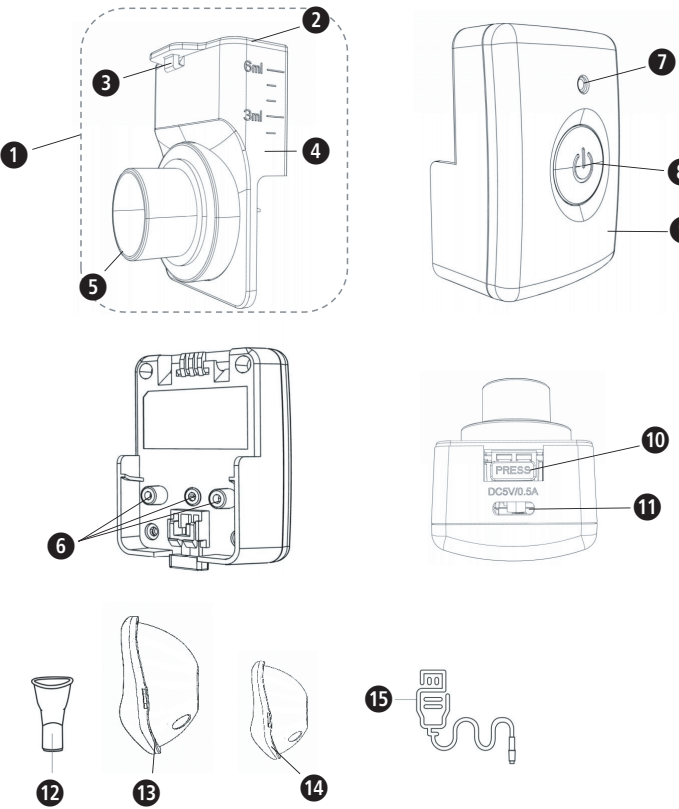

Apparat og betjeningselementer

- 1 Forstøverhodeenhet
- 2 Deksel
- 3 Lukkemekanisme
- 4 Forstøvertank
- 5 Forstøverhode
- 6 Elektroder
- 7 LED-lampe
- 8 Av-/På-bryter
- 9 Grunnenhet
- 10 Demonter-knappe
- 11 Ladekabeltilkobling
- 12 Munnstykke
- 13 Voksenmaske
- 14 Barnemaske
- 15 USB-C-kabel

